

Catalogue Volume 7

ペットの為のコンフォートライフ

義肢・装具・車いす・リハビリ用品・介護用品

アニマル



オルソジャパン



info@animalortho.jp
www.animalortho.jp




ソフトゲルチューブ ©

Soft Gel Tube

伸縮性に優れている為、血流を妨げず装着できます。

特徴

- 傷の保護
- 包帯などの汚れ予防
- 伸縮性抜群
- お手入れ簡単

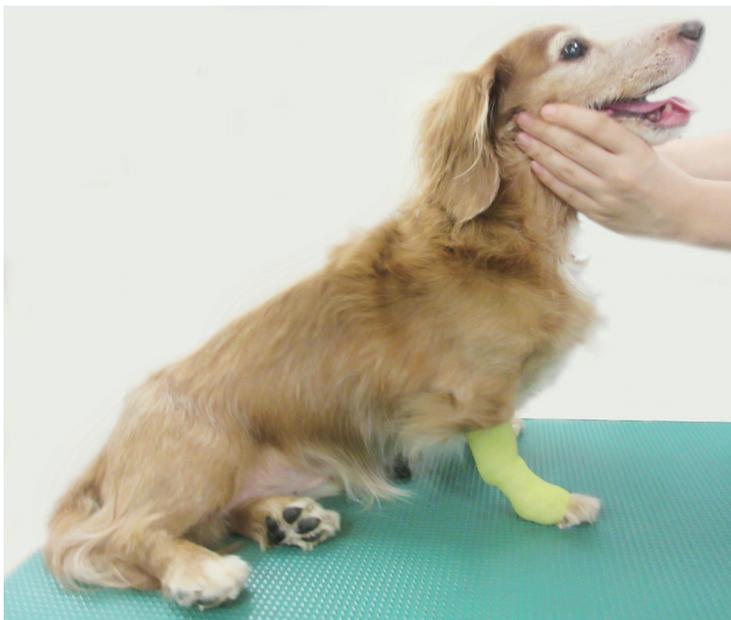


指定の長さにハサミでカットできます。



サイズ表		※サイズごとにカラーが違います。
サイズ	カラー	適応周径
3S	イエロー	5 cm～8 cm
SS	ブラック	6 cm～9 cm
S	ブルー	7 cm～10 cm
M	ピンク	8 cm～12 cm



長さ : 約 15 cm (3S～Mまで同じ)

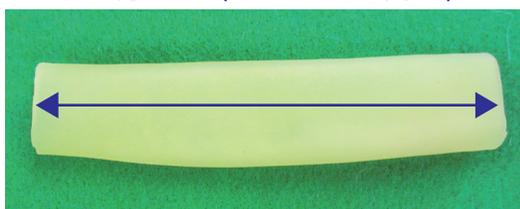

● お手入れ方法

30度までのぬるめのお湯で優しく手洗いした後、日陰でしっかり乾かしてください。
汚れがひどい場合は中性洗剤をお使いください。
(ドライクリーニング・乾燥機・漂白剤入洗剤等の使用はお控えください)

希望小売価格 ¥ 3,300 (税込)

足を保護する

おさんぽソックス © Gel-type Walking socks

肉球から出血してしまう…
老犬で足が弱ってきた…
おさんぽ後の足拭きが面倒…
そんなお悩みの方にオススメ！



イエロー ピンク ブルー ブラック
1セット (2個入)

こんなに伸びる!!!



効果・効能

- ① アスファルトやマンホールの熱から保護！
- ② 肉球や足部の傷を保護！！
- ③ フローリングの滑り対策！
- ④ ナックリングによる足先保護！！
- ⑤ 雨の日のお散歩にも最適！
- ⑥ 防災グッズとしても活用可能！！
- ⑦ 雪遊びやレジャーにも！




包帯の上に
ソックスを
履けば汚れ防止に



雪からも守ります!!!

サイズチェック表

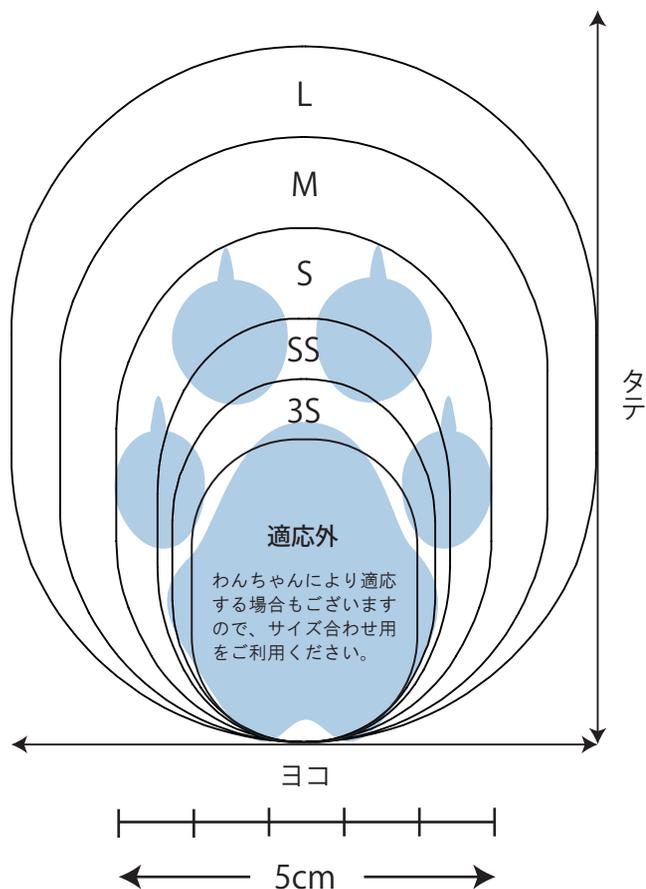

ジャストサイズ

足の形が出るまでソックスが伸び、
ピッタリとフィットしている



サイズチェックの際の注意点


- ① ワンちゃんが立っている時に接地している肉球を合わせて下さい。
- ② タテの長さは爪先まで、ヨコの幅は一番太いところで合わせて下さい。

ポイント

サイズ選択に迷った時は小さいサイズの方がオススメです。

参考犬種サイズ

3S	チワワ・ポメラニアン・シーズー
SS	ミニチュアダックスフント（後肢）・柴犬（後肢） フレンチブルドッグ・トイプードル
S	ミニチュアダックスフント（前肢）・柴犬（前肢） コーギー（後肢）
M	ボーダーコリー・ボクサー・コーギー（前肢）
L	ラブラドル・ゴールデンレトリバー

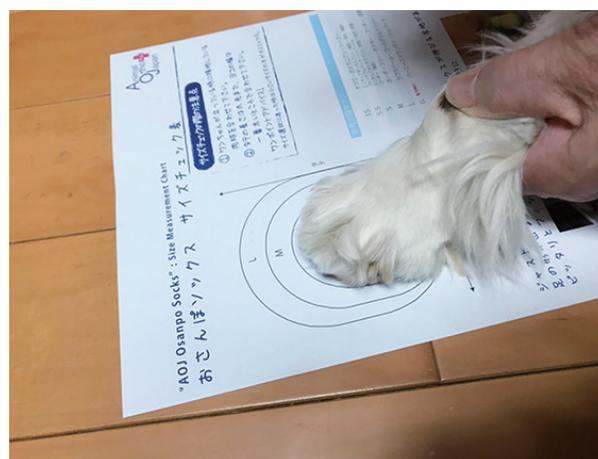

NG

まだソックスが伸びる余地があると
脱げる原因に



3S・SS ￥3,960
S・M ￥4,180
L ￥4,400



頸椎用コルセット

Cervical corset

優しくしっかり固定

軽量スポンジ使用

マジックで簡単着脱
周径調整

軽量




ホールドカラー スポンジタイプ

Hold-Collar Sponge type

水玉ピンク 水玉グリーン ボーダーブラウン イエロー



4色からお選び頂けます

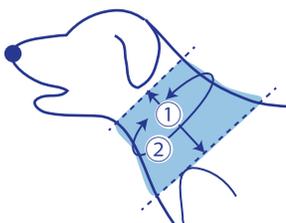

	SS チワワ	S トイプードル	M ダックスフンド コーギー	L ビーグル コリール	LL レトリバー ハスキー
①長さ	6cm	8cm	10cm	12cm	14cm
②周径	19~23 cm	23~28 cm	22~34 cm	32~40 cm	38~47 cm
本体重量	27.5g	45g	64g	93.5g	142.5g

※高さは、ホールドカラー本体の寸法です。
※周径は、わんちゃんの周径目安値です。

既製品のサイズを手直し調整することができます
(有料) ご相談ください。

希望小売価格 ¥9,900

頸椎用コルセット

Cervical corset



既製品
READY-MADE

通気性抜群

しっかり固定

マジックで簡単着脱
周径調整

軽量



ホールドカラー メッシュタイプ

Hold-Collar Mesh type

希望小売価格 ¥12,100

サイズ



スタンダード

	3S	SS	S	M	L	LL
①高さ	5cm	6cm	8cm	10cm	12cm	14cm
②周径	17-22 cm	19-23 cm	23-28 cm	22-34 cm	32-40 cm	38-47 cm

ショートタイプ

	3S	SS	S	M	L	LL
①高さ	—	—	6cm	8cm	10cm	12cm
②周径	—	—	23-28 cm	22-34 cm	32-40 cm	38-47 cm

※長さは、ホールドカラー本体の寸法です。 ※周径は、わんちゃんの周径目安値です。

頸椎用コルセット

既製品 READY-MADE



Cervical corset

ピタカラーノーマルタイプ◎ Pita-Collar Normal type


特徴

- 前屈・後屈・側屈運動を制限
- 頸椎 5・6・7 番まで保持
- 角度調整可能



色が選べます。ブルー・オレンジ

角度調整が可能です

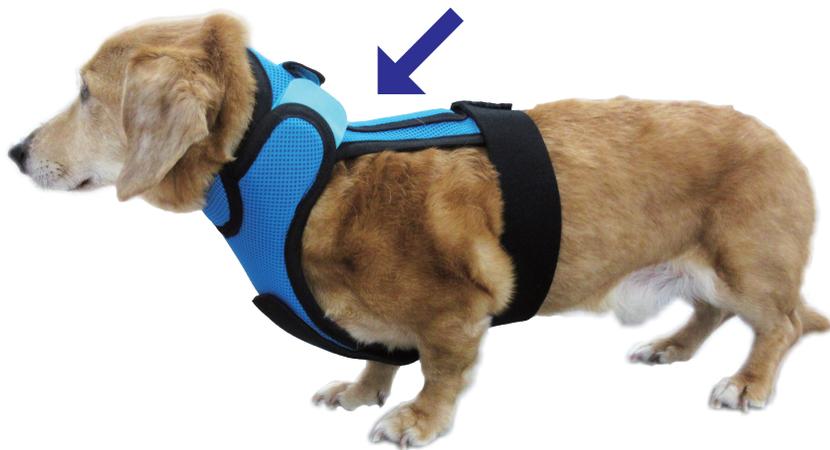

希望小売価格 ¥16,500 (税込)

ピタカラーオプション付タイプ◎ Pita-Collar Option type

顎受け・頭部保持タイプ

特徴

- 前屈・後屈・側屈運動を制限
- 頸椎 1～7 番まで保持
- 角度調整可能



色が選べます。ブルー・オレンジ



2箇所の角度調整が可能です



サイズ	① 下顎～肩甲骨までの長さ	② 首 (中間) の周径
S	6～8 cm	23～29 cm
M	9～11 cm	30～39 cm
L	12～14 cm	40～49 cm

既製品のサイズを手直し調整することができます (有料) ご相談ください。

希望小売価格 ¥20,350 (税込)

胸腰椎用コルセット

既製品 READY-MADE

Thoracolumbar corset

Animal
Ortho P&O
Japan

バランスコルセット ©

Balance-Corset

特徴

- 背骨ラインは手術創にやさしいやわらか素材
- 装着した状態で排泄可能
- 動きにフィットするスポーツデザイン
- マジックで簡単着脱
- 通気性抜群
- お散歩できるコルセット



希望小売価格 ¥13,200 (税込)

ピタコル ©


Pita-Coru

特徴

- 術後も安心硬性コルセット
- マジックで簡単着脱
- 屈曲・進展・側屈制限
- 装着のまま排泄可能
- マジックで簡単着脱



色が選べます。ブルー・オレンジ

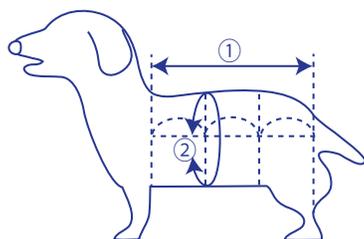

サイズ	① 肩甲骨～尾根	② ①の前から 1/3 の位置の胸回り
S	23～26 cm	55 cmまで
M	27～30 cm	
L	31～33 cm	
LL	34～37 cm	
3 L	41～45 cm	

※ 3 Lはバランスコルセットのみ

既製品のサイズを手直し調整することができます (有料) ご相談ください。

希望小売価格 ¥15,400 (税込)

肩関節サポーター

Hold shoulder

ホールドショルダー

肩を脱臼したわんちゃんの動きを制限

歩行を妨げません

簡単着脱




ピンク



イエロー



装着したままでも歩行ができます

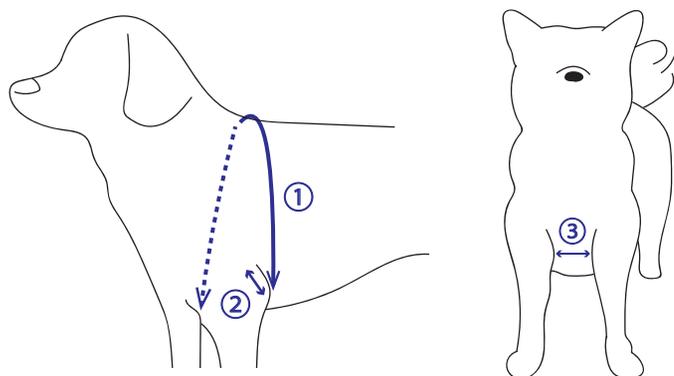

ソフトメジャーで①～③の計測を行ってください。

セット内容



サポーター



固定バー 2サイズ
★どちらか1個を使用

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしていただきません。

サイズ	①左肘関節～右肘関節までの長さ	②前肢付根～肘関節の長さ	③ 左右肘関節位置での長さ
S	30～34cmまで	3.5cm 以上	4～5cm
M	35～38cmまで		5～6cm

希望小売価格 ¥19,800 (税込)

フットアツプゴム

※後肢専用

Animal
Ortho P&O
Japan

軽度のナックリングに

簡単装着

足を引きずってしまうわんちゃんに
ゴムの力で足先を引き上げます

小型犬用



中型犬用



大型犬用



【小型犬用対象犬種】※目安

チワワ・ダックスフンド

※コーギー・ダックスフンドは、②本体ベルトの高さが適合するかご確認ください。

【中型犬用対象犬種】※目安

柴犬・コーギー

【大型犬用対象犬種】※目安

ゴールデンレトリバー

サイズ適応表

※ソフトメジャーで計測してください。



	①足根関節上周径	②本体ベルトの高さ
小型犬用	8 ~ 12cm	3cm
中型犬用	10 ~ 15cm	3.5cm
大型犬用	10 ~ 15cm	5.5cm まで

★の距離が、②の数値以上であれば適合します。

希望小売価格 ¥7,700 (税込)

膝サポーター

このサポーターを装着するには、
前肢用のハーネスが必要になります。

ホールドニー

膝関節の安定

ずり落ちない


装着したまま排泄可能



両側に芯材が入っている為、
しっかり支えることができます！



健足側には、リングを通し、
ハーネスに繋げる為ずり落ちにくくなっています！

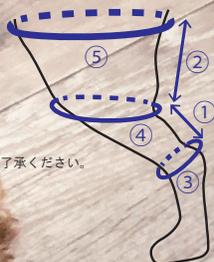

★左右あります。両側も可能。

サイズ	4-14	5-14	7-16	8-19	9-22
① 長さ	4～5cm	5～6cm	7～8cm	8～9cm	9～10cm
② 長さ	3～5cm	5～8cm	5.5～8.5cm	6～9cm	6～9cm
③ 周径	7～9cm	7～9cm	7～10cm	9～12cm	12～15cm
④ 周径	13～15cm	13～15cm	14～18cm	17～21cm	20～24cm
⑤ 周径	14.5～17.5cm	16～19cm	20～24cm	22～26cm	30～34cm

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしていただきません。

希望小売価格 ¥20,900 (税込)

歩行介助用

Animal
Ortho P&O
Japan

ヒップリングハーネス

歩行補助が可能

装着したまま排泄可能

簡単着脱



大型犬用も
あります！



持ち手の長さ

ウエスト周径



チワワ



トイプードル



柴犬



ゴールデン
レトリバー

	SS	S	M	L
リング内径	8cm	9.5cm	12.5cm	15cm
持ち手の長さ	55 ~ 65cm	55 ~ 65cm	35 ~ 55cm	10 ~ 20cm
ウエスト周径	23 ~ 28cm	29 ~ 35cm	39 ~ 45cm	53 ~ 57cm

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないでください。

★犬種は、あくまで参考となります。

希望小売価格 ¥9,900 (税込)


わんにゃんマット © Pressure Mat

特徴

- 患部への圧迫感を軽減
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材
- 撥水・防水清拭タイプ
- ケージに合わせたサイズ製作可能 (有料)



猫・小型犬用		中・大型犬用
縦 65× 横 40× 厚さ 5cm	サイズ	縦 100× 横 60× 厚さ 5cm
約830g	重量	約1650g
低反発ポリウレタンフォーム ポリウレタンフォーム※1	材質	ポリウレタンフォーム ウレタンチップフォーム※2
カバー: ポリウレタンフィルム ラミネート加工布 (抗菌・撥水)	材質	カバー: ポリウレタンフィルム ラミネート加工布 (抗菌・撥水)

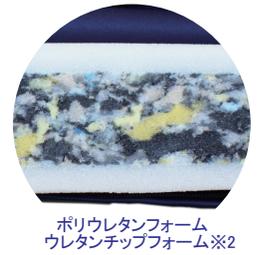

希望小売価格: 猫・小型犬用 ¥13,200 中・大型犬用 ¥16,500



AOJ おむつカバー © Diaper covers

後肢麻痺でおむつを引きずって歩いてもずれないようにカバー

特徴

- マジックと両開きファスナーで簡単着脱
- メッシュタイプで通気性抜群
- 防水生地使用!

防水生地使用!

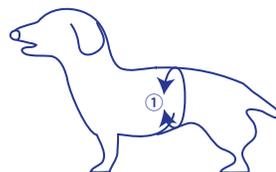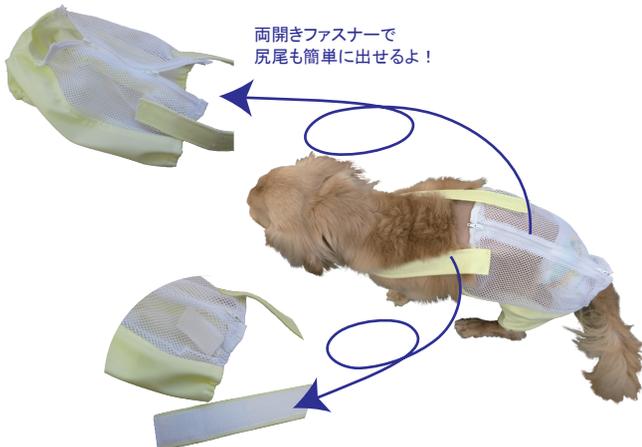

サイズ	① 肋骨後ろの周径
S (ミニチュアダックス用)	30~45 cm
M (コーギー用)	45~65 cm

※洗濯方法:
中性洗剤で手洗い後、陰干してください。

マジックでベタッと留めてズレ防止!
(お好きな長さにハサミでカットできます)

希望小売価格 ¥16,500

コルク製副子コルクスプリント © ※病院様のみ販売

Cork Sprint

骨折時の安静維持、良肢位の確保

特徴


- 骨折部位の支持・固定
- 通気性に優れた空気孔加工
- 動物にやさしいコルク素材
- 簡単カット



※下巻き材の上から使用し、粘着テープで固定



ハサミで必要な長さにカット出来ます

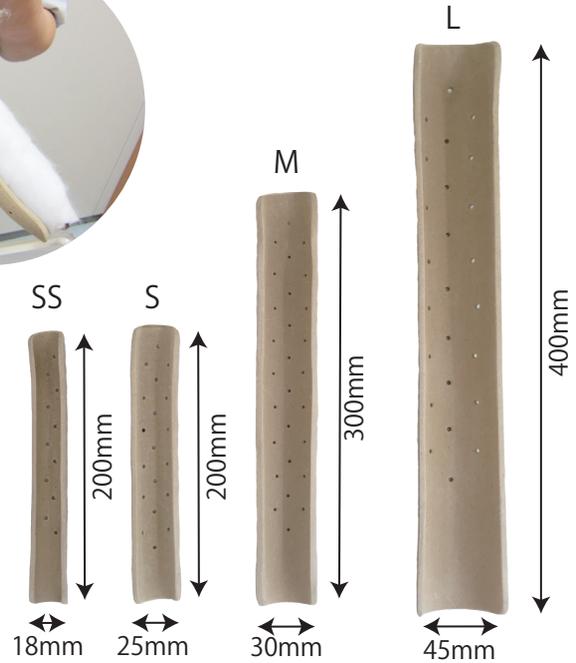

初回限定セット

SS×4本 S×4本 M×4本 L×1本

費用は、お問合せください


A O J オペ室マット © ※病院様のみ販売

Operating room mat

術者の足からくる疲労を軽減する

特徴

- 適度な弾力性足・腰の疲れを軽減
- 抗菌処理済菌の増殖を防ぎます
- 断熱効果が高い足元の冷えを軽減
- 防水加工水洗いできます

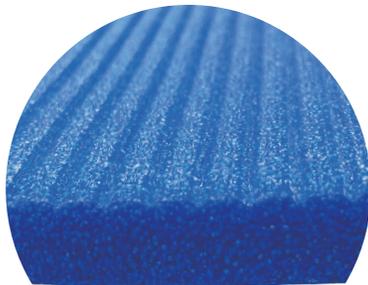

表面は滑りにくい波型パターン



※使用例

【サイズ】 W900×D600mm, T=15.20mm

費用は、お問合せください

わんわん担架 © ※病院様のみ販売

doggy-stretcher

怪我や病気、緊急時など移動が困難な場合の運搬介助

特徴

- マジック固定で安心搬送
- アルミパイプでとっても軽い
- 移動シートで動物を簡単移動（有料）

- ・耐荷重：50 kg
- ・サイズ：1244×644
- ・本体重量：2.6 kg
- ・材質：アルミパイプ・ナイロン
- ・日本製



マジックで簡単固定できます。
3本ベルトでしっかり固定！
動物の大きさに合わせてご使用ください。



移動用シートで滑らし、簡単に担架へ乗せられます！※移動用シートはオプションです。

ナイロンメッシュで動物達に負担が少ない。オプションの移動用シートを併用すれば、スムーズに担架へ乗せられます。



① 移動用シートに動物を乗せます。



② 動物を押し滑らせ移動します。



③ シートを引抜き移動完了！



移動用シートは筒状。
摩擦抵抗が小さく、
少ない力で移動させる
事ができます！

費用は、お問合せください

オーダーメイド装具のご注文の流れ

遠距離の場合（ご来店不可能な場合）は病院様にて、採型・採寸のご協力を頂き、装具を製作しております。

【製作の流れ】

- ① 対象動物の歩様や症状を撮影（動画・静止画像）して頂き、弊社へメールやLINEでお送りください。
 - ↓
 - ② ドクターのご意見を伺い、製作する装具のご提案・見積提示をさせていただきます。
 - ↓
 - ③ 採型キットをお送りします。
 - ↓
 - ④ 採型・採寸のご協力をお願い致します。
 - ↓
 - ⑤ 採型キットのご返送
 - ↓
 - ⑥ 装具製作・発送
 - ↓
 - ⑦ 病院様で装着（納品）
- ※もし適合に不具合がある場合は、修正等のご相談※

【採型・採寸の方法】

ご注文が確定しましたら、採型キットをお送りさせていただきます。

採型キット内容

- 採型用プラスチックシート
- 採寸用紙
- 患者様の情報



75度以上のお湯に採型用プラスチックシートを浸すと、柔らかくなりますので動物の患部に巻き付け、採型を行って頂きます。詳しい方法、採型角度・範囲はその都度異なりますので、ご案内させて頂いております



採型して頂いたモデル・採寸用紙を弊社までご返送頂きます。
弊社に採型キットが届き次第、1週間～2週間程度で製作させていただきます。
まずはお気軽にご相談くださいませ。

メールアドレス：info@animalortho.jp（画像動画の添付は10メガ以内）
公式ラインアカウント：『アニマルオルソジャパン』で検索
お問合せの際は、病院名・症状・動画、画像ご相談内容を記載の上お問合せくださいませ。



← LINEを開いて頂き、LINEのQRコードリーダーでスキャンして頂くと、『アニマルオルソジャパン』をお友達追加できます。

※動画・画像は症状がわかるように動物と同じ高さカメラを合わせて撮影してください※

AOJ 胸腰椎コルセット © カラー選択可能：ブラック・レッド・イエロー

AOJ Corset

用途 特徴

- 椎間板ヘルニア
- 悪性腫瘍
- 脊椎の不安定



コルセット型ハーネス



費用目安 ¥28,000 ~
納期：1 ~ 2 週間

※価格は、犬種や仕様により異なります。

AOJ 軟性サポーター ©

AOJ Soft Supporter

カラー選択可能：ブラック・ピンク・イエロー・ブルー

対象疾患 関節炎・靭帯損傷 等

用途 特徴


- 関節保持
- 関節の側方動揺制限
- 簡単着脱

歩行動画

QRコードを読み込むと
YOUTUBE に移動します。



前肢用

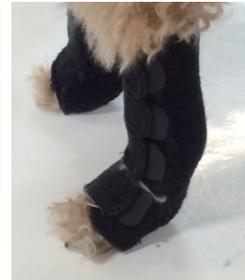

後肢用



費用目安 ¥30,000 ~
納期：1 ~ 2 週間

※価格は、犬種や仕様により異なります。

AOJ シューホン装具 ©

AOJ Shoe Horn Brace

対象疾患 神経麻痺によるナックリング 下肢の変形 等

用途 特徴

- 関節保持
- 関節の側方動揺制限
- ナックリングに対するフットアップ効果
- 屋外活動でも壊れにくい強い素材



歩行動画

QRコードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

装具無し



装具有り



体に当たる部分は
クッション性に優れた
素材を使用

費用目安 ¥50,000 ~

納期：1 ~ 2 週間

※価格は、犬種や仕様により異なります。

AOJ VAPC 装具 ©

AOJ VAPC Brace

対象疾患 手根・足根関節側副靭帯損傷 橈骨神経麻痺 等


用途 特徴

- 関節保持
- 関節の側方動揺制限
- 屈曲・伸展角度を任意に設定
- 屋外活動でも壊れにくい強い素材

伸展制限用



手根関節外転防止装具

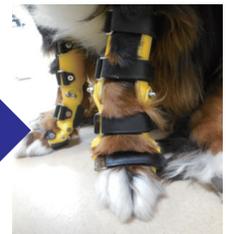

過伸展防止装具



歩行動画

QRコードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

装具無し



装具有り



費用目安 ¥60,000 ~

納期：1 ~ 2 週間

※価格は、犬種や仕様により異なります。



AOJフットウェア®

AOJ Footwears

対象疾患 胸腰椎椎間板ヘルニア、リウマチ、肉球損傷等

用途 特徴

- 関節保持
- ナックリングに対するフットアップ効果
- 屋外活動でも破れにくい強い素材
- 歩行時も逃げにくく安定保護
- リウマチに対する傷予防

歩行動画

QRコードを読み込むとYOUTUBEに移動します。

フットウェア無し

フットウェア有り



カラー選択可能：ブラック・ピンク・イエロー・ブルー

【前肢用】



【後肢用】



爪先のやぶれ防止にプラスチックカバー付き

費用目安 ¥30,000 ~
納期：1 ~ 2 週間

※価格は、犬種や仕様により異なります。

AOJ ファンクショナルフラクチャーブレース ©

AOJ Functional Fracture Brace


対象疾患 橈骨・尺骨骨折 等

用途 特徴

- 骨折部位での圧迫による固定
- 脱着可能
- ギブス固定の代用として

【固定方法】


巻込み式（サルメント方式）により、筋肉を周囲から圧迫する事により骨折部を固定し、筋肉の委縮・関節の拘縮を防止、骨癒合が促進される

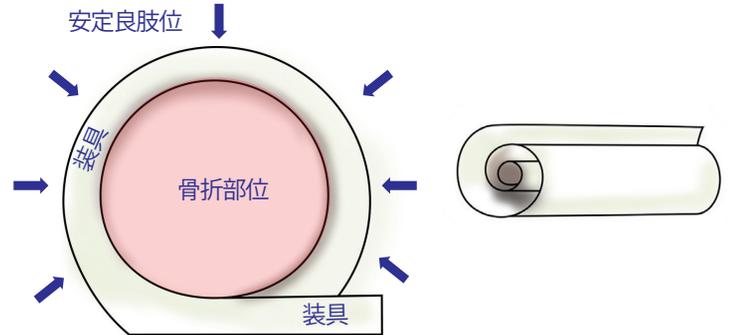

全体を巻き、包み込む事により、外圧からのねじれを抑制



マジックベルトで固定

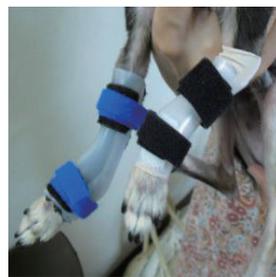

橈尺骨骨折や偽関節に製作した例

費用目安 ¥40,000 ~
納期：1 ~ 2 週間

※価格は、犬種や仕様により異なります。

AOJ アキレス腱用装具 ©

AOJ Achilles tendon Brace

対象疾患 アキレス腱損傷 アキレス腱断裂 等

用途 特徴

- 関節可動域の固定
- 屈曲・伸展角度を任意に設定

ジョイント部分で角度調整可能
任意角度で固定も可能です

拡大画像



伸展固定



屈曲固定

費用目安 ¥70,000 ~
納期：1 ~ 2 週間

※価格は、犬種や仕様により異なります。

AOJ ライナー式義足 ©

AOJ Liner Prosthetics

対象疾患 前肢・後肢の切断、離断
切断、離断を予定されている場合は、事前にご相談も可能です。

用途 特徴

- 断脚後の歩行具
- 断端保護用ライナー（ソフトゲルソックス）
- 歩行時も脱げにくく安全保護

歩行動画

QRコードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

義足無し



義足有り



左：プラスチック製の義足本体
右：断端保護用ライナー（黄色）



①ライナーを被せた断端を
プラスチック製の本体に挿入



②マジックベルトで固定



拡大画像



費用目安 ¥100,000 ~
納期：1 カ月 ~

※価格は、犬種や仕様により異なります。

AOJ 2輪カート◎

AOJ Cart 2 Wheels

対象疾患 胸腰椎ヘルニア、外傷性脊髄損傷、脊髄腫瘍 等

用途 特徴

- 軽量アルミニウム使用
- 重心位置調整の為、後輪位置を移動することが可能
- 前輪タイプも製作可能
- 乗せ降ろし簡単

ホイールキャップ(タイヤ部分)に
好きな文字が入れます。(有料)



ご購入前にレンタルでお試し乗りが可能です。

【フレームカラー選択可能：レッド・ブルー・シルバー】


アルミパイプタイプ



アルミ棒タイプ



後輪の位置を前後に移動することができます

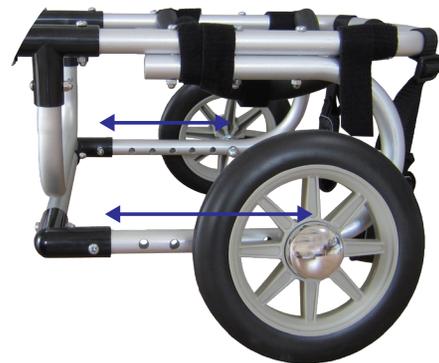

前輪タイプ



【ご注文の流れ】

ご来店頂かなくても、採寸データと仮合せのご協力のみで、製作可能です。

- ① 採寸用紙 FAX
 - ② 仮合せカート製作(約2週間)・発送
 - ③ 仮合せ
 - ④ 仮合せカートご返却
 - ⑤ 納品カート製作(約2週間)・発送
- アフターフォローもしております

歩行動画

QRコードを読み込むと YOUTUBE に移動します。
アルミパイプタイプ アルミ棒タイプ



費用目安 ¥93,500 ~
納期：約 1 カ月

※価格は、犬種や仕様により異なります。

AOJ 4輪カート◎

AOJ Cart 4 Wheels

対象疾患 変性性脊髄症、頸椎椎間板ヘルニア 脳腫瘍 等

用途 特徴

- 軽量アルミニウム使用
- 前輪の脱着が可能
- 乗せ降ろし簡単
- 病状に合わせてバージョンアップが可能
- 合成皮革で体を優しくホールド

ホイールキャップ(タイヤ部分)に
お好きな文字が入られます。(有料)



ご購入前にレンタルでお試し乗りが可能です。

フレームカラー選択可能：レッド・ブルー・シルバー

アルミパイプタイプ

アルミ棒タイプ




前肢が更に弱い場合はセミロング4輪カート

前肢にも8の字シートが追加されている為、より体重を免荷する事が可能



8の字シート(前肢用)

8の字シート(後肢用)

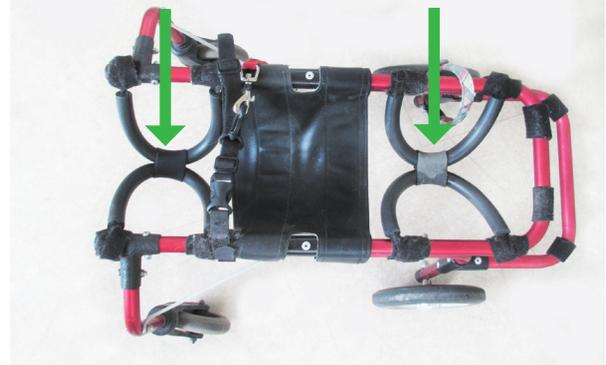

【ご注文の流れ】

ご来店頂かなくても、採寸データと仮合せのご協力のみで、製作可能です。

- ① 採寸用紙 FAX
 - ② 仮合せカート製作(約2週間)・発送
 - ③ 仮合せ
 - ④ 仮合せカートご返却
 - ⑤ 納品カート製作(約2週間)・発送
- アフターフォローもしております

歩行動画

QRコードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

4輪タイプ



セミロング4輪タイプ



費用目安 ¥104,500 ~
納期：約1ヵ月

※価格は、犬種や仕様により異なります。

AOJ 介助カート ©

AOJ Assistance Cart

対象疾患 変性性脊髄症、老化による四肢麻痺 自立・歩行困難等

用途 特徴

- 4輪カートを介助カートに加工可能
- 軽量アルミニウム使用
- 手押しバー付
- 乗せ降ろし簡単
- 合成皮革で体を優しくホールド
- 今までと変わらない視界（高さ）でお散歩できる

【フレームカラー選択可能：レッド・ブルー・シルバー】



付属品：前肢乗せベルト・顎乗せベルト
症状の進行に合わせてベルトのカスタム可能



費用目安 ¥137,500 ~
納期：約 1 カ月

※価格は、犬種や仕様により異なります。

歩行動画

QRコードを読み込むと YOUTUBE に移動します。

顎乗せ + 前肢乗せベルト無し



前肢乗せベルトのみ使用



顎乗せ + 前肢乗せベルト使用（要頭部保持）



AOJ オプション付カート ©

AOJ Cart With Options

対象疾患 変性性脊髄症、脳腫瘍 全身麻痺 等

用途 特徴

- 症状に合わせてオプションを追加
- 軽量アルミニウム使用
- 製作前にしっかり打合せ

お気軽にご相談ください。

顎乗せテーブル付



顎乗せベルト付



ウサギ用カート



費用は、お問合せください


AOJ 吊り下げトレッドミル © Treadmill

用途：前肢・後肢の歩行訓練、運動不足の解消等

特徴


- 安心安全な歩行訓練
- ガイドバーによる旋回揺れ防止
- 調整可能な負荷設定

- ・ 介助歩行が困難な場合の歩行訓練
- ・ 体重の免荷、旋回防止により、負担の少ない歩行訓練が可能

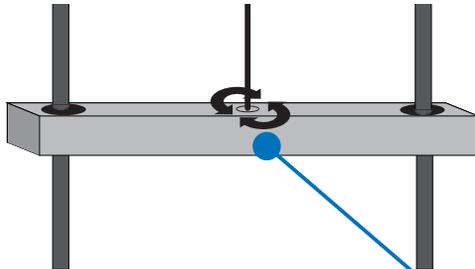

※ガイドバーにより前後・左右・回旋の揺れを防止し
安全な訓練が可能になります

費用は、お問合せください

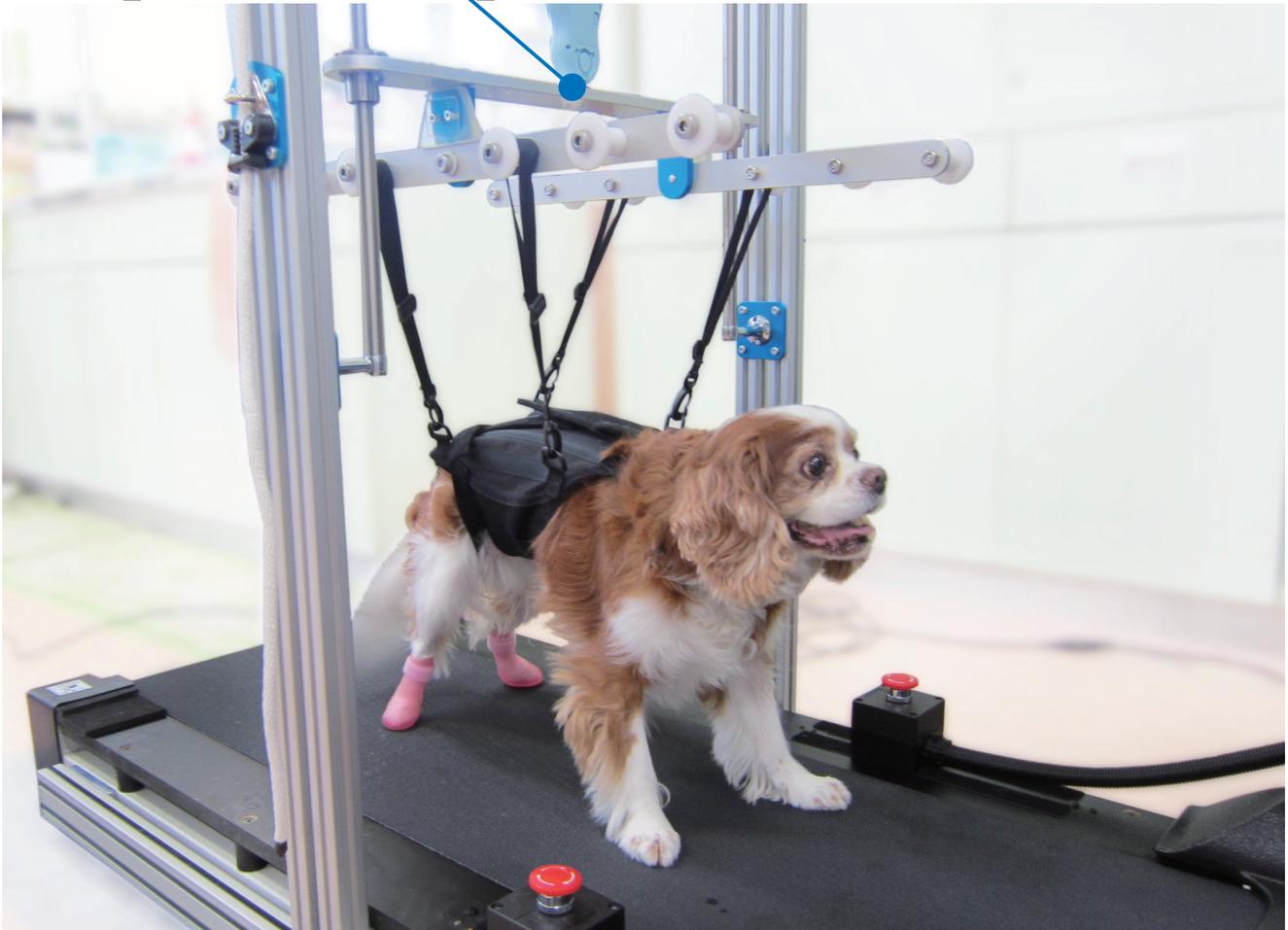

AOJ 3D プリンターモデル © AOJ 3D Printer Model

手術前にシュミレーションをすることで術者が安心してストレスフリーで手術に挑む事ができます。

特徴

- 術式検討プレートベンディングが可能
- 手術時間短縮により好結果を得ることが可能
- オーナー様へのご説明にも有効
- 様々な整形外科・軟部外科手術・脳神経外科・頭頸部外科に対して適応可能です。
- 筋肉・骨・血管・臓器の製作が可能



顎関節可動モデル デンタルケアの授業の教材や、飼主様への歯磨き指導にお使い頂けます。



・CT (MR)画像が必要 (※DICOMデータ)
0.6 3mm以下のスライスピッチを推奨

材料:エポキシ系 紫外線硬化樹脂
※人体に害が少ない材料
色:半透明

費用・納期は、お問合せください



<http://www.animalortho.jp>

製品お問合せ窓口

tel. (0568) 48-8610 (代)

fax (0568) 48-8612

email: info@animalortho.jp

営業時間：8：30AM～5：00PM

定休日：水曜・日曜・祝日・祭日 (年末年始等)

〒485-0804 愛知県小牧市大字池之内蓮池 409-1

お振込み先 (名義：株式会社松本義肢製作所)
三菱東京UFJ銀行東支店 当座番号 711-218
郵便振替 00890-0-17963

記載製品の開発にあたりましてご指導、ご助言を賜りました。

「AOJ装具」 犬山動物総合医療センター 太田 丞 先生



開業獣医師であり、特に外科に携わる者として術前・術後、或いは手術を選択しない場合にもオルソ療法は重要な選択肢です。例えば高齢や病気治療中などのハイリスクな動物で、手術を

選択できない場合などには保存療法(装具療法)を勧めます。

或いは術前・術後に数日間でも患部をサポートしたい時が多々あります。

今までは殆ど場合は獣医師たちが、独自に考案していました。

器用に造られる先生も多いのですが、やはり専門家をお願いした方が作成期間も早く見た目も機能性にも富んでいます。

そこで今回、ご紹介するAOJ製品は様々な症例に対し犬山動物総合医療センターにおいて私を始めとしてスタッフと協力しながら試行錯誤

を重ねて造り上げて来た様々な装具です。外科に興味の有る先生方は

勿論、それ以外の先生方にも一度、手にとって使ってみて頂きたい

ラインナップです。大切な動物たちが病気になったとき少しでも早く快適に

過ごせる為にAOJの装具を活用しましょう。

「AOJカート」 神志那 弘明先生



脊髄を損傷した動物に対するカートの活用は、回復期のリハビリテーションとその後のQOLの維持に重要です。AOJカートは軽量で動きやすく脱着が簡単なのが特徴です。しかもとても

スタイリッシュ!四輪タイプは、変性性脊髄症の全病期をサポートできるカートです。病気の進行により後肢、さらに前肢の筋力が低下し、それに伴って動物の重心はダイナミックに変化します。重心の変化に合わせて車軸を移動することで、より少ない力で無理なくカートを進めることが可能になります。病末期には前輪はさらに前方へ移動し、介助バーによって歩行の補助が可能になります。今までにはない画期的なカートと言えます。